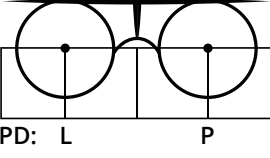
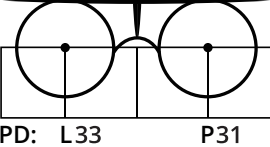


Pokyny pre vyplnenie objednávkového formulára na dioptrické sklá

Je nevyhnutné, aby ste pred online nákupom okuliarových skiel, podstúpili meranie u svojho očného špecialistu. Odovzdá vám lekársku správu alebo priamo poukaz na okuliare. Bude fajn, keď budete vedieť, čo ktorý údaj znamená, takže sme si pre vás pripravili rýchly prehľad údajov, ktoré sú pre vás dôležité a budete ich potrebovať pre objednanie dioptrických okuliarových skiel. Pri vyplňaní objednávky si radšej 2x skontrolujte, že ste správne rozlíšili a zadali parametre pre pravé a ľavé oko.

Ako čítať predpis na dioptrické okuliare?

NA DIAĽKU		SPH	CYL	AX	DRUH ŠOŠOVKY
 PD: L P	P				
	L				
NA BLÍZKO		SPH	CYL	AX	DRUH ŠOŠOVKY
 PD: L33 P31	P	-1,75	+0,75	19	
	L	-1,25	-0,25	50	

Predpis môže vyzeráť napríklad takto. Lekári ale používajú rôzne predtlače.

Niektorí oční špecialisti uvádzajú pri meraní iba jednu hodnotu PD - musíte ju teda vydeliť 2, aby ste dostali hodnotu pre pravé a ľavé oko.

Sféra (SPH) - predstavuje hodnotu sférickej dioptrie. Na predpise ju nájdete v plusových alebo mínusových hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriú nie je vyplnené, alebo je tu zapísaná nula, v objednávkovom formulári vyberte 0,00. Ak je v poli pre dioptriú znamienko rovnosti (=), potom vo formulári vyberte negatívnu (-) hodnotu.

Cylinder (CYL) - táto hodnota značí astigmatizmus. Znamená to, že na rohovke je nejaká nerovnosť a táto cylindrická dioptria ju vyrovná. Ak váš predpis hodnotu pre CYL neobsahuje, pri objednaní nechajte vo formulári cylinder 0,00.

Os (AX) - označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak hodnota na predpise nie je vyplnená, pri objednaní nechajte vo formulári os 0.

Vzdialenosť zreníc (PD) - táto hodnota ukazuje vzdialenosť medzi zorničkami v milimetroch. Presná vzdialenosť je dôležitá pre správne vycentrovanie skiel v obrubách. Aj to má vplyv na ostrosť videnia. U väčšiny ľudí je vzdialenosť od zreničky ku koreňu nosa medzi 28-35 milimetrami, ale samozrejme sú aj výnimky. Ak vám lekár túto hodnotu nezapíše do predpisu na okuliare, môžete si ju zmerať sami s našou pomôckou na meranie PD (nájdete ju na našich stránkach). Ak máte na predpise 1 hodnotu, vydeľte ju a získate hodnotu pre pravé a ľavé oko ($61 : 2 = 30,5$).

Vyplňte vaše parametre

	Dioptrie	Cylinder	Osa	Vzdialenosť zreníc (PD)
Pravé oko	-1.75 ▼	+0.75 ▼	19 ▼	31 ▼
	Dioptrie	Cylinder	Osa	Vzdialenosť zreníc (PD)
Ľavé oko	-1.25 ▼	-0.25 ▼	50 ▼	33 ▼